

Wskaźniki stosowania

Opis produktu

RespoSorb Silicone jest opatrunkiem do leczenia sączących ran ostrych i przewlekłych o wysięku umiarkowanym do dużego. Warstwa silikonowa, będąca w styczności z raną, umożliwia łatwą aplikację i bezboleśnie, bezwarzownie usuwanie. Małdy chronią wchłania i utrzymuje wewnątrz wydzielinę.

Skład

RespoSorb Silicone składa się z wkładu chłonnego wykonanego z celulozy i wysokochłonnej polikrylany, przeznaczonego do wchłaniania i zatrzymywania wysięku. Od strony rany jest pokryty warstwą kontaktową w postaci drobnej siateczki silikonowej, ułatwiającej nakładanie opatrunku i pierzylającego do rany. Podłoże opatrunku jest wykonane z włókiny polypropylenowej w kolorze zielonym, która jest hydrofobowa, a jednocześnie przepuszcza powietrze, umożliwiając wymianę gazową.

Właściwości i sposób działania

Wkład chłonny opatrunku RespoSorb Silicone wchłania wysięk i utrzymuje go wewnątrz. Silikonowa, mikro-przylegająca warstwa kontaktowa zapobiega przesuwaniu się opatrunku i ułatwia jego nakładanie. Zmiany opatrunku przebiegają bezwarzownie i bezboleśnie.

Wskazania

RespoSorb Silicone nadaje się najlepiej do stosowania w leczeniu ran ostrych (rany po urazach, poparzeniach, rany poropieczynia) lub przewlekłych (owrzodzenia, odleżyny, rany nowotworowe, stopa cukrzycowa) o wysięku umiarkowanym do dużego.

Zakładanie i zmiana opatrunku

- Oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej lub zgodnie z instrukcją lekarza.
- Wybrać odpowiednią dla rany wielkość opatrunku, upewniając się, że wkład środkowy wychodzi poza krawędzie rany na około 1–2 cm. Nie przycinac opatrunku.
- Po przemyciu rany i zaleczeniu rany opatrunku, należy się upewnić, że obszar wokół rany jest suchy (lekarstwo należy użyć wacików) w celu zapewnienia przylegania opatrunku.
- Ściągnąć warstwę ochronną. Opatrunek przyłożyć do rany przylegającą stroną. Złaska strona ma znajdować się po stronie przeciwnej do rany.
- Przymocować opatrunek przy użyciu bandaży podtrzymującego Peha-haft® lub innego odpowiedniego produktu podtrzymającego albo założyć bandaż uscikowy zgodnie z instrukcją lekarza.
- Opatrunek może pozostać na ranie przez kilka dni w zależności od stanu rany i ustalonego protokołu klinicznego.
- Zmiana opatrunku jest konieczna, jeśli jest to wskazane klinicznie lub gdy wysięk dotrze do brzozy opatrunku.

Szczególne środki ostrożności

- Nie przycinac opatrunku.
- Przed rozpoczęciem leczenia rany, której gojenie przebiega nieprawidłowo, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyn takiego stanu. Leczenie rany z wykorzystaniem RespoSorb Silicone nie może zastąpić przyczynowego leczenia nieprawidłowego gojenia się rany. Jeśli występują kliniczne objawy przedmiotowe zakażenia, przed zastosowaniem tego opatrunku należy wyliczyć zakażenie, stosując odpowiednie leczenie.
- We wszystkich przypadkach należy przestrzegać ustalonego protokołu klinicznego.
- Nie są dostępne informacje wskazujące na korzyści ze stosowania opisywanego opatrunku u osób wrażliwych, takich jak noworodki, dzieci, kobiety w ciąży lub kobiety karmiące; podobnie jak nie są dostępne dane o braku takich korzyści, dlatego w tych populacjach ten opatrunek powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności i zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Przeciwwskazanie

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Działania niepożądane

Nasilenie wysięku, maceracja, nasilenie bólu, przyleganie opatrunku do rany, uczucie swędzenia, uczucie pieczenia, obrzęk, liczne owrzodzenia, uszkodzenia skóry, pęcherze, rumień. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

Uwagi szczególne

Przechowywać w pozycji leżącej w suchym miejscu; chronić przed światłem. Nie wolno łuszczyć ponownie.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2017-07

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone



Szczelny szew opakowania jednostkowego zawiera lateks z naturalnego kauczuku, który może prowadzić do reakcji alergicznych!

Ponownie użycie wtyrbu medycznego przeznaczonego do jednorazowego użycia jest niebezpieczne. Przygotowywanie wtyrbów do ponownego użycia może prowadzić natuszyć ich integralności i wpłynąć na ich wydajność. Informacje dostępne na stronie.

Hasznalati utasítás

Termékleírás

A RespoSorb Silicone közepesen vagy erősen váladékozó akut és krónikus sebek kezelésére használatos kötés. A sebből érzékelő szilikon réteg egyszerű felhelyezést és fájdalommentes, atraumatikus eltávolítást tesz lehetővé. Az abszorberende párná felszívja és visszatartja az sebváladékot.

Összetétel

A RespoSorb Silicone egy cellulózból és magas felszívőképességgű poli-akrírból készült abszorbersz párnát tartalmaz, melyek célja a váladékok felszívása és megtartása. A seb felőli oldal finom hálószerű felülettel rendelkezik, mely elősegíti a kötés felhelyezését és gátolja a sebhöz történő tapadást. A kötés alaraja zöld színű, nem tonot polipropilénből készül, amely hidrofób, de átérteszi a levegőt, így lehetővé teszi a gázcserét.

Tulajdonságai és hatásmechanizmusa

A RespoSorb Silicone felszívja a váladékot, és visszatartja az abszorbers párnában. A mikroadhérens, szilikon felület megakadályozza a kötés elcsúszását, és segíti a felhelyezést. A kötéscsere trauma és fájdalom nélkül elvégezhető.

Javallatok

A RespoSorb Silicone közepesen vagy erősen váladékozó akut és krónikus sebek (traumás sebek, égési sebek, operáció utáni hegek), és krónikus sebek (fekélyek, daganatos sebek, diabéteszes láb) kezelésére használatos kötés.

A kötés felhelyezése és cseréje

- A sebet fiziológias sóoldattal, vagy a kezelőorvos utasításának megfelelően tisztítsa meg.
- Vállasszon a sebbel megfelelő méretű kötszert, ügyeljen arra, hogy a középső párná a seb szélein 1-2 cm-rel túllógjon. Ne vágja el a kötsét.
- A kötés felhelyezése előtt és a seb átlátszóttá után ellenőrizze, hogy a seb körül börtüreltet száraz (használgion vattát), hogy a kötés odatarpadhasson.
- Távolítsa el a védőfilákkal. Helyezze a kötsét a tapadó felével a sebre úgy, hogy a zöld színi felület a sebbel ellentét oldalán legyen.
- A kötszert Peha-haft, valamint más megfelelő rögzítő vagy kompressziós kötés segítségével rögzítse a kezelőorvos döntésének megfelelően.
- A kötszer a seb állapotától és az alkalmazott klinikai protokolltól függően több napig is a seben maradhat.
- A kötsét akkor kell cserélni, ha ez klinikailag indokolt, vagy ha a váladék eléri a kötés szélét.

Különleges biztonsági előírások

- Né vágja el a kötsét.
- Sebgógyulási zavar esetén a kezelés előtt egyeztetni kell az orvossal klinikai diagnózis felállításá érdekében. A RespoSorb Silicone-nal történő kezelés a sebgógyulási zavarok etiápiáját nem helyettesíti. Ha a fertőzőesnek klinikai jelei vannak, a fertőzésen a jelen sebfedő használatá előtt a megfelelő kezelést kell alkalmazni.
- Minden esetben kövesse a megállapított klinikai protokollt.
- Mivel a kötés érzékenyebb populációs csoportokra, például a csecsemőkre, a gyermekre, terhes vagy kisgyermeket tápláló nőre való alkalmazásával kapcsolatos adatok nincsenek, illetve ezzel ellentétes adatok sincsenek, ezekben a populációs csoportokban a kötsét óvatosan kell alkalmazni, orvos ajánlása alapján.

Ellenjavallatok

Hiperérzékenység bármelyik komponensére.

Mellékhatások


Megnövekedett váladékképződés, maceráció, fokozott fájdalom, a kötés hozzátapadása a sebhöz, viszketés, égő érzés, ödéma, többszörös fekélyesedés, bőrtörézettség, hólyagok, erythema. Ha a fenti mellékhatások közül bármelyik fellelül, forduljon orvoshoz.

Különleges utasítások

Feketve, száraz helyen, fénytől védve tárolandó. Nem sterilizálható újra.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2017. 07.

Né használja, ha a csomagolás sérült!

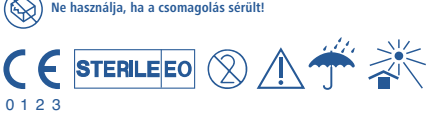

A simítózáras csomagolás zárszalagja kauscsugkumból készült, így allergás reakciókat válthat ki!

Egyeser használatos onvosi eszköz veszélyes újból felhasználni. Az újbbi használat érdekében újra feldolgozott eszközök integrálása és teljesítménye jelentős mértékben csökkenhet. Kérése további információ! biztosítunk.

Инструкция по способу действия

Описание продукта

RespoSorb Silicone — это повязка для лечения острых и хронических ран с умеренной и обильной экссудацией. Контактующий с раной силиконовый слой обеспечивает легкость бether, а также безболезненное и atraumatичное удаление повязки. Ассорбирующая основа впитывает экссудат и удерживает его внутри повязки.

Состав

Повязка RespoSorb Silicone имеет ассорбирующую основу, которая изготовлена из целлюлозы и суперabsorbierende полиакрилат и суперabsorbierende polyakrylat, for absorption og fastholdelse af eksudat. På sår siden er den dækket med en finmasket siliconegrænseseflade, der gør det nemmere at anlægge forbindingen og hæmmer vedhæftning til såret. Forbindingslægen er lavet af gran, non-woven polypropylen, der er hydrofob, men tillader gennemtrængelig for luft, hvilket gør gasudvekslingen til. Underlaget er lavet af mikroholdtæftning forhindrer forbindelsen i at glide og gør den nem at anlægge. Forbindingen kan skiftes atraumatisk og smertefrit.

Свойства и способ действия

Повязка RespoSorb Silicone впитывает экссудат и удерживает его внутри ассорбирующей основы. Микроадгезивный силиконовый слой предотвращает соскальзывание повязки и облегчает ее наложение. Это обеспечивает atraumatичную и безболезненную смену повязки.

Показания

Повязка RespoSorb Silicone подходит для лечения ран с умеренной и высокой степенью экссудации: острых ран (травматических ран, ожогов, послеоперационных ран) и хронических ран (баз, пролежней, опухолных ран, диабетической стопы).

Указания по наложению и смене повязки

- Очистите рану физиологическим раствором или в соответствии с указаниями врача.
- Взберите подходящий размер повязки, убедившись, что центральная часть повязки перекрывает края раны примерно на 1-2 см. Не разрезайте повязку.
- Повязка может оставаться на ране в течение нескольких дней, что зависит от состояния раны и действующего клинического протокола.
- Чтобы обеспечить надежное приклеивание повязки, после промывания раны перен наложением повязки высучите область вокруг раны с помощью тампона.
- Удалите защитные пленки. Разместите повязку клейкой поверхностью на рану таким образом, чтобы зеленая поверхность располагалась на противоположной от раны стороне.

- Закрепите повязку с помощью бинта Peha-haft или любого другого подходящего фиксирующего материала или при необходимости наложите компрессионный бинт в соответствии с указаниями врача.
- Повязка может оставаться на ране в течение нескольких дней, что зависит от состояния раны и действующего клинического протокола.
- Смена повязки должна осуществляться по клиническим показаниям или при достижении экссудатом края повязки.

Особые меры предосторожности

- Не разрезайте повязку.
- Перед лечением ран с нарушением заживления необходимо получить консультацию врача с целью постановки клинического диагноза. Лечение с помощью повязки RespoSorb Silicone не может заменить этиотропную терапию нарушений заживления раны. При наличии клинических признаков инфекции следует провести ее надлежащее лечение, прежде чем использовать данную повязку.
- Во всех случаях следуйте действующему клиническому протоколу.
- Данные, подтверждающие возможность применения данной повязки у особых групп пациентов (младенцы, дети, беременные или кормящие грудью женщины), а также данные об обратном отсутствуют. Поэтому у указанных групп пациентов эту повязку следует использовать с осторожностью и после рекомендации врача.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов изделия.

Побочные эффекты

Усиление экссудации, мацерация, усиление боли, прилипание повязки к ране, зуд, жжение, отек, множественные изъязвления, разрывы кожи, образование волдырей, эритема. При возникновении любого из перечисленных побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Хранить в горизонтальном положении в сухом, защищенном от света месте. Не стерилизовать повторно.

Информация по состоянию на: 2017-07

Не использовать, если повреждена упаковка



Запечатанный шов реел-упаковки содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции!

Повторное использование медицинского изделия, предназначенного для одноразового применения, является опасным. Устройства для обработки, используемые с целью повторного применения таких изделий, могут нанести серьезный вред их целостности и работоспособности. Информация предоставляется по запросу.

Bruksanvisning

Produktbeskrivning

RespoSorb Silicone är ett förband för behandling av akuta och kroniska sår med måttlig till stor exsudatproduktion. Silikonlagert i kontakt med såret möjliggör enkel applicering och smärtfri, atraumatisk borttagning. Det absorberande dynan absorberar och håller kvar exsudatet.

Sammansättning

RespoSorb Silicone innehåller en absorberande dyna av cellulosa och superabsorberende polyakrylat till absorption og fastholdelse af eksudat. På sårnsiden är den dækket med en finmasket siliconegrænseseflade, der gør det nemmere at anlægge forbindingen og hæmmer vedhæftning til såret. Forbindingslægen er lavet af gran, non-woven polypropylen, der er hydrofob, men tillader gennemtrængelig for luft, hvilket gør gasudvekslingen til.

Egenskaber og virkeme

RespoSorb Silicone absorberer og håller kvar eksudatet i den absorberende dynan. Den mikrohåfttæftning kontaktytan i silikon hindrar förbundet från att glida och gör det lätt att applicera. Förbindingen kan skiftes atraumatisk och smertefrit.

Indikationer

RespoSorb Silicone är lämpligt vid behandling av sår med måttlig till stor exsudatproduktion: akuta sår (traumatisks sår, brännskador, postoperativa sår) och kroniska sår (ulcerosa sår, trycksår, tumörer, diabetesfötter).

Bruksanvisning och förbandsbytt

- Rengör såret med fysiologisk ösning eller enligt läkares anvisning.
- Välj en förbandsstorlek som är lämplig för såret och se till att dynan når 1 till 2 cm utanför sårkanterna. Klipp inte till förbundet.
- När såret har rengjorts och innan förbundet appliceras ska ytan runt såret göras fullständigt torr med hjälp av svabbar, så att förbundet fäster ordentligt.
- Ta bort skyddsarken. Lägg förbundet med fästytan mot såret, så att den gröna sidan vetter bort från såret.
- Fast förbundet med Peha-haft® eller annan lämplig fästing, eller vid behov med kompressionsbandage enligt läkares anvisningar.
- Förbundet kan sitta kvar på såret i flera dagar, beroende av sårets skick och etablerat kliniskt protokoll.
- Förbundet måste bytas om det rekommenderas av kliniska skäl eller när exsudatet når ut till kanten på förbundet.

Sårskilda försiktighetsåtgärder

- Klipp inte till förbundet.
- Innan en sårskingsstörning behandlas måste en läkare konsulteras så att en diagnos kan ställas. Behandlingen med RespoSorb Silicone kan inte ersätta behandling av orsakerna som ligger bakom såråkningsstörningen. Om det finns kliniska tecken på infektion ska infektionen tas om hand med hjälp av lämplig behandling innan detta förband kan användas.
- Följ alltid etablerat kliniskt protokoll.
- I avsaknad av tillgängliga data som stöder användningen av detta förband på särskilda populatngsgrupper såsom spädbarn, barn samt gravida och ammande kvinnor, och i avsaknad av data om motsatsen, ska förbundet användas med försiktighet och på läkares rekommendation på dessa populationsgrupper.

Kontraindikation

Överkänslighet mot någon av beståndsdelarna.

Bivirkningar

Öget exsudat, maceration, ökad smärta, vidhäftning av förbundet mot såret, klåda, brännande känsla, ödem, bildning av multipla sår, hudslitage, blåsor, rindor. Rådfråga läkare om någon av dessa bivirkningar skulle uppstå.

Sårskilda upplysningar

Förvaras tørt och liggende, skyddat från ljus. Får inte återsteriliseras.

Datum för översyn av texten: 2017-07

Använd inte förbundet om förpackningen är bruten



Peel-förpackningens förselingsösm innehåller naturlig gummitex, som kan orsaka allergiska reaktioner!

Genbrug af medicinske enheder til engangsbrug er forbundet med fare. Rengøring og sterilisering med henblik på genanvendelse kan beskadige enhedens integritet og ydeevne på sigt. Oplysninger kan rekvireres efter anmodning.

Bruksanvisning

Tuotteen kuvaus

RespoSorb Silicone on hoitoaineet erittävien akuttien ja kronisten haavojen hoitoon tarkoitettu side. Haavapuoien silikonikerro mahdollistaa helpon asetuksen ja kiuvuttoman, atraumaattisen irrottuksen. Imukykyinen tyyny imee tulehdusnesteen ja pitää sen sisällään.

Sammensætning

RespoSorb Silicone består af et absorberende lag af cellulose og superabsorberende polyakrylat til absorption og fastholdelse af eksudat. På sårnsiden er den dækket med en finmasket siliconegrænseseflade, der gør det nemmere at anlægge forbindingen og hæmmer vedhæftning til såret. Forbindingslægen er lavet af gran, non-woven polypropylen, der er hydrofob, men tillader gennemtrængelig, så luftarterne kan passere.

Egenskaber og virkeme

RespoSorb Silicone absorberer eksudat og holder det i det absorberende lag. Grænseladen i silicone med mikrovedhæftning forhindrer forbindelsen i at glide og gør den nem at anlægge. Forbindingen kan skiftes atraumatisk og smertefrit.

Indikationer

RespoSorb Silicone egner sig til behandling af akutte sår med moderate til store mængder eksudat (traumatiske sår, forbrændinger, postoperative sår) og kroniske sår (fclus, tryksår, sultvår, diabetesfodår).

Anlæggelse og skift af forbinding

- Rens såret med en fysiologisk opløsning eller efter lægens anvisninger.
- Vælg en forbinding, der passer til sårets størrelse, således at den midteste del når ca. 1-2 cm ud over kanten af såret. Forbindingen må ikke klippes til.
- Efter rensning af såret og far anlæggelse af forbindingen skal det sikres ved hjælp af tamponer, at området omkring såret er tørt nok til at sikre vedhæftning.
- Fjern de beskyttende ark. Anlæg forbindingen med den klæbende side mod såret, således at den grønne side vender væk fra såret.
- Fastgør forbindingen med en Peha-haft-forbinding eller en anden passende fästing. Anlæg kompressionsbind efter lægens anvisninger, hvis det er nødvendigt.
- Forbindingen kan sidde på såret i flere dage afhængigt af dets tilstand og den etablerede kliniske protokol.
- Forbindelsen skal skiftes, når der er klinisk indikation derfor, eller når eksudatet når kanten af forbindingen.

Særlige forholdsregler

- Klipp ikke til forbundet.
- Før behandling af et langsomt helende sår skal en læge konsulteres for at få en klinisk diagnose. Behandlingen med RespoSorb Silicone kan ikke erstatte en kausalbehandling af det, der hindrer helingen. Hvis der forekommer kliniske tegn på infektion, skal infektionen bekæmpes med hensigtsmæssig behandling, før denne forbinding kan tages i brug.
- Den etablerede kliniske protokol skal følges under alle omstændigheder.
- Hvis der ikke findes data til støtte for anvendelsen af denne forbinding til sensitive populationsgrupper, såsom spädborn, børn, gravide eller ammande kvinder, og hvis der ikke findes data om det modsatte om disse populationsgrupper, skal forbindingen anvendes efter klinikerens anbefaling.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af forbindingskomponenter.

Bivirkninger

Øget eksudat, maceration, flere smerter, vedhæftning til såret, kløe, brændende fornemmelse, ødem, flere macerationer, forrevet hud, blærer, erytem. Søg læge, hvis nogen af disse bivirkninger opstår.

Særlige oplysninger

Opbevares liggende, tørt og beskyttet mod lys. Må ikke resteriliseres.

Dato for ændring af teksten: 2017-07

Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget



Den forseglede sæt på peel-pakningen indeholder naturlig gummitex, som kan udløse allergiske reaktioner!

Genbrug af medicinske enheder til engangsbrug er forbundet med fare. Rengøring og sterilisering med henblik på genanvendelse kan beskadige enhedens integritet og ydeevne på sigt. Oplysninger kan rekvireres efter anmodning.

Käyttöohjeet

Tuotteen kuvaus

RespoSorb Silicone on hoitoaineet erittävien akuttien ja kronisten haavojen hoitoon tarkoitettu side. Haavapuoien silikonikerro mahdollistaa helpon asetuksen ja kiuvuttoman, atraumaattisen irrottuksen. Imukykyinen tyyny imee tulehdusnesteen ja pitää sen sisällään.

Koostumus

RespoSorb Silicone -säteessä on selluloosasta ja erittäin imukykyisistä polyakrylaalista valmistettu imetyy, joka imee ja pitää eritteet sisällään. Haavapuoella säteessä on hienosta silikonikerrosta valmistettu kosketuspinta, joka helpottaa siteen asetusta ja ehkäisee sen tarttumista haavasta. Siteen taustapuoli on valmistettu polypropylenikuukankaasta, joka hylkii vettä, mutta päästää lävseen ilmaa ja mahdollista kaasujen vaihtumisen.

Ominaisuudet ja toimintatapa

RespoSorb Silicone imee itseensä eritteitä ja pitää ne imutyynin sisällä. Mikrolimauttava silikonipinta estää siten siirtymisen ja helpottaa sen asettamista. Side voidaan vaihtaa atraumaattisesti ja kiuvuttomasti.

Käyttöaiheet

RespoSorb Silicone soveltuu hoitalsesti tai runsaasti erittävien akuttien (traumaariseit haavat, palovammat, leikkaushaavat) ja kroonisten (haavaumat, makuaahaat, kasvainahaavat, diabetekesta aiheutuvat jalkahaavat) haavojen hoitoon.

Siteen asettaminen ja vaihtaminen

- Puhdista haava fysiologisella liuoksella lääkärin ohjeiden mukaan.
- Valitse haavalle sopivan kokoinen side. Side on sopivan kokoinen kun sen keskitytynytää noin 1–2 cm haavan reunojen yli joka puolelta. Sidetää ei saa leikata.
- Varmistaa haavan huultelemisen jälkeen, ennen siteen asettamista, että haavaa ympäröivä iho on kuiva. Varmista siteen hyvä liimautuminen kuivaamalla alue puhtaassa pumpulipuikolla.
- Pistota suojalukset. Aseta side liimapuoli alaspain haavan päälle niin, että vihrä puoli osoittaa ylöspäin.
- Kinnitä side Peha-haft-sidoksen tai muun soveluvan sidoksen avulla tai käytä lääkäriin niin määrättyä kompressiotaideä.
- Sidetää voidaan pitää haavan päällä useita päiviä haavan tilasta ja laitoksen vakio-ohjeistuksesta riippuen.
- Sidos on vaihdettava, jos siihen on kliininen indikaatio tai kun eritteet saavuttavat siteen reunan.

Eriytiset varoitomet

- Sidetää ei saa leikata.
- Ennen heikosti paranevan haavan hoidon aloittamista on kysyttävä neuvoa lääkäriltä, joka muodostaa kliinisen diagnossin. Hoito RespoSorb Silicone -säteellä ei korvaa haavan huonon paranemisen syiden hoitoa. Mikäli huomattavissa on klinisiä merkkejä infektiosta, infekto on saatava hallintaan sopivalla hoitolla ennen kuin kliniese testi on kättävä.
- Noudatta kaikissa tapauksissa laitoksen vakio-ohjeistusta.
- Koska tämän siteen käytöstä herkilie potilasyrhmille, kuten pikkulapsille, lapsille, raskaana oleville tai imettäville naisille, ei ole tietoja puolesta eikä vastaan, sidetää tulee käyttää näille ryhmille lääkäriin suosituksesta erityisessä valvonnassa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys mille tahansa siteen osalle.

Haittavaikutukset

Isäntäntynyt eritys, maseraatio, lisääntynyt kipu, siteen kinnittyminen haavaan, kutina, polttava tunne, eedema, useita haavaumaia, ihon repeytyminen, ihon ödem, damnellä av sår, rifter i huden, blæmmer, erytem. Hvis noen av disse bivirkningene forekommer, må du rådføre deg med lege.

Eriytisoheet

Säilytettävä vaakaostasaa, kuivassa, valotta suojatuna. Ei saa steriloida uudelleen.

Tekstin muuttamispäivämäärä: 2