



# Veroval®


## SELBST-TEST

### Drogen

#### Multi-Schnelltest zur Eigenanwendung


#### Und so wird's gemacht:

1

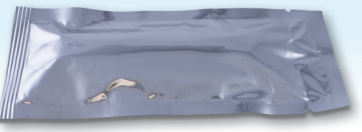


**Vorbereitung:**  
Bringen Sie die Testkassette im Folienbeutel vor Testbeginn auf Raumtemperatur (15 °C–27 °C). Nehmen Sie den Drogentest aus der Folienverpackung.

2




- Sammeln Sie frischen Urin in einem Becher. Bei Trübungen im Urin warten Sie bitte, bis sich diese absetzen.
- Entfernen Sie die Schutzkappe und tauchen Sie den Drogentest für mindestens 10 Sekunden bis zur Markierung in den Urin. Stellen Sie sicher, dass die Testkassette nur bis zum unteren Rand eingetaucht wird.
- Achten Sie darauf, das Auswertungsfenster nicht zu berühren und keinen Urin darauf zu bringen.

3

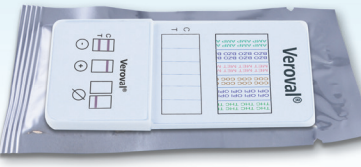


- Stecken Sie die Kappe wieder auf die Testkassette und legen Sie diese auf eine ebene Fläche. Berühren oder bewegen Sie die Testkassette nicht mehr. Warten Sie auf das Erscheinen der farbigen Linien im Reaktionsfeld.

4

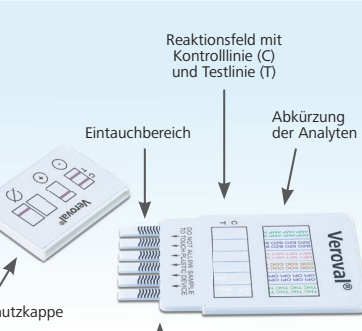


- Lesen Sie das Ergebnis nach ca. 5 Minuten ab, aber nicht nach mehr als 10 Minuten.
- Der Drogentest muss bei guten Lichtverhältnissen ausgewertet werden, damit auch schwache Farblinien erkannt werden können.

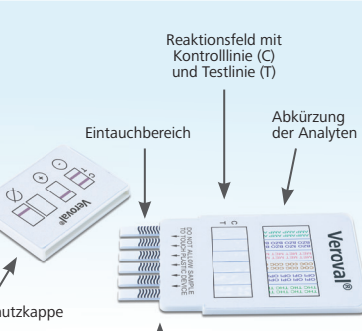

#### Zur Auswertung des Ergebnisses bestimmen Sie zunächst, ob im Reaktionsfeld unter (C) jeweils eine Linie zu sehen ist. Es ist unerheblich, wie stark oder schwach die Kontrolllinie ausgeprägt ist. Jeder Teststreifen ist einzeln auszuwerten.


#### Negatives Ergebnis



Bei einem negativen Ergebnis, also einer **drogenfreien Urinprobe**, erscheinen in den Reaktionsfeldern **hell- bis dunkelrote Testlinien (T)** und **hell- bis dunkelrote Kontrolllinien (C)**.

Die Konzentration dieser spezifischen Drogen (oder ihrer Derivate) in der Probe liegt unterhalb des Grenzwertes.


#### Positives Ergebnis



Bei einem **positiven Ergebnis** erscheinen in den Reaktionsfeldern **keine Testlinien (T)** und nur **hell- bis dunkelrote Kontrolllinien (C)**.

Die Konzentration dieser spezifischen Drogen (oder ihrer Derivate) in der Probe liegt oberhalb des Grenzwertes. Rückschlüsse über die Höhe der Konzentration und damit die Schwere des Konsums sind nicht möglich.

#### Ungültiges Ergebnis

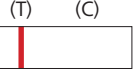

Wenn Sie in den Reaktionsfeldern **nur Testlinien (T)**, **keine Kontrolllinien (C)** oder **gar keine Linien** sehen, ist der **Test ungültig**.

Überprüfen Sie, ob Sie alle Punkte der Gebrauchsanweisung genau befolgt haben. Führen Sie einen neuen Test mit einer neuen Urinprobe durch.

#### Hinweise und Einschränkungen:

- Der Multi-Schnelltest ist kein Medizinprodukt und darf daher nicht zu diagnostischen Zwecken herangezogen werden.
- Nur wenn tatsächlich **keine Testlinie (T)** sichtbar ist, ist der Test positiv.
- Vorsätzlich eingesetzte Verfälschungsmittel können den Test beeinträchtigen. Im Falle einer vermuteten Verfälschung sollte der Test mit einer neuen Urinprobe wiederholt werden.
- Der Selbst-Test kann nicht zwischen Missbrauchsdrogen und artverwandten verschreibungspflichtigen Medikamenten unterscheiden.
- Obwohl eine Beeinträchtigung des Tests durch eine Bandbreite an Stoffen ausgeschlossen werden kann, kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Substanzen sowie technische oder verfahrensbedingte Fehler das Testergebnis verfälschen.

# Veroval®


## ZELFTEST

### Drugs

#### Multi-sneltest voor eigen gebruik


#### Zo voert u de test uit:

1

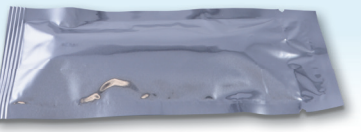


**Vorbereitung**  
Brenge de testkassette in de aluminium verpakking op kamertemperatuur alvorens de test te beginnen (15 °C tot 27 °C). Haal de drugstest uit de aluminium verpakking.

2




- Vang verse urine op in een beker. Bij vertroebelingen in de urine moet u wachten totdat deze neerslaan.
- Verwijder de afsluitdop en dompel de drugstest gedurende minimaal 10 seconden tot aan de markering in de urine. Zorg ervoor dat de testkassette uitsluitend tot aan de onderste rand wordt ondergedompeld.
- Let erop dat u het evaluatievenster niet aanraakt en dat er geen urine op komt.

3

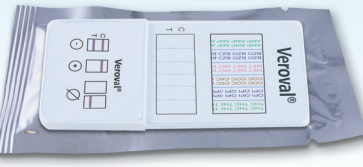


- Doe de afsluitdop weer op de testkassette en leg deze op een vlak oppervlak. Raak de testkassette niet meer aan en beweeg deze niet meer. Wacht totdat de gekleurde lijnen in het reactieveld verschijnen.

4

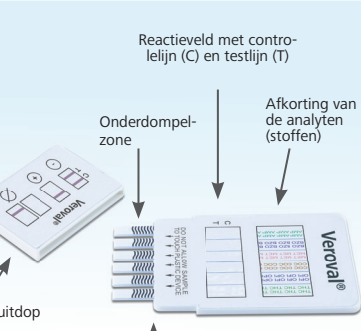


- Lees het resultaat na ong. 5 minuten af, maar niet later dan 10 minuten.
- De drugstest moet bij goed licht worden geëvalueerd, zodat ook licht gekleurde lijnen kunnen worden onderscheiden.

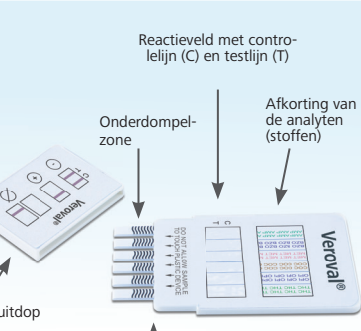

#### Om het resultaat te beoordelen, moet u eerst controleren of er een lijn zichtbaar is in het reactieveld onder (C). Het maakt niet uit hoe duidelijk of onduidelijk de controlelijn zichtbaar is. Elke testlijn moet individueel worden beoordeeld.


#### Negatief resultaat

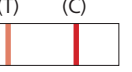

Bij een negatief resultaat, dus bij een **drugsvrij urinemonster**, **verschijnen in de reactievelden licht- tot donkerrode testlijnen (T)** en **licht- tot donkerrode controlelijnen (C)**.

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun derivaten) in het monster ligt onder de grenswaarde.


#### Positief resultaat



Bij een **positief resultaat** verschijnen in de reactievelden **geen testlijnen (T)** en alleen **licht- tot donkerrode controlelijnen (C)**.

De concentratie van deze specifieke drugs (of hun derivaten) in het monster ligt boven de grenswaarde. Conclusies over de hoogte van de concentratie en de overeenkomstige ernst van het gebruik zijn niet mogelijk.

#### Ongeldig resultaat

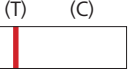

Als u in de reactievelden **uitsluitend testlijnen (T)**, **geen controlelijnen (C)** of **helemaal geen lijnen** ziet, is de **test ongeldig**.

Controleer of u alle stappen in de gebruiksaanwijzing correct hebt doorlopen. Voer nogmaals een test uit met een nieuw urinemonster.

#### Aanwijzingen en beperkingen:

- De multi-sneltest is geen medisch product en mag daarom niet voor diagnostische doeleinden worden gebruikt.
- Uitsluitend wanneer er daadwerkelijk **geen testlijn (T)** zichtbaar is, is de test positief.
- Opzettelijk gebruikte vervalsingsmiddelen kunnen de test beïnvloeden. In het geval van een vermoedelijke vervalsing dient de test met een nieuw urinemonster te worden herhaald.
- De zelftest kan geen onderscheid maken tussen drugsmisbruik en het gebruik van verwante medicamenten die uitsluitend op voorschrift verkrijgbaar zijn.
- Hoewel het beïnvloeden van de test door een uitgebreide reeks stoffen kan worden uitgesloten, kan niet worden uitgesloten dat andere stoffen en technische fouten of fouten die samenhangen met de uitvoering van de test het testresultaat vervalsen.

# Veroval®


## AUTO-TEST

### Drogues

#### Multi-test rapide


#### Voici comment procéder :

1

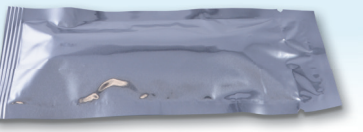


**Préparation :**  
Amenez le sachet avec cassette-test à température ambiante (15 °C à 27 °C) avant le début du test. Retirez le test de dépistage de drogue du film d'emballage.

2




- Recueillir l'urine fraîche dans un récipient. Si l'urine est trouble, attendez que les composés se déposent dans le fond du récipient avant de faire le test.
- Retirez le cache de protection et plongez le test de dépistage de drogue dans l'urine jusqu'au repère pendant au moins 10 secondes. Assurez-vous que la cassette-test n'est immergée que jusqu'au bord inférieur.
- Veillez à ne pas toucher la fenêtre d'évaluation et à n'y verser aucune urine.

3




- Remettez le cache de protection sur la cassette-test et posez-la sur une surface plane. Ne touchez et ne déplacez plus la cassette-test. Veuillez attendre l'apparition des deux lignes de couleur dans la zone réactive.

4

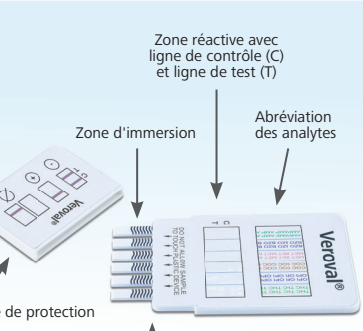


- Lisez le résultat après 5 minutes environ, mais veuillez ne pas dépasser 10 minutes.
- Le test de dépistage de drogue doit être analysé avec une clarté ambiante suffisante afin de pouvoir identifier les lignes faiblement colorées.

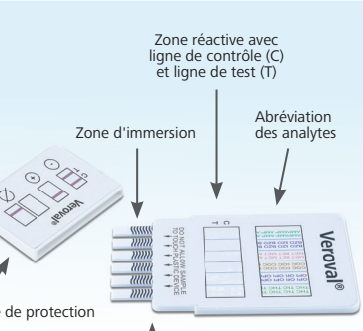

#### Pour évaluer le résultat, vérifiez tout d'abord la présence d'une ligne dans la fenêtre de test sous (C). Peu importe l'intensité de la teinte de la ligne de contrôle. Chaque bandelette doit être analysée individuellement.


#### Résultat négatif

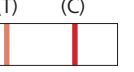

Le résultat est négatif en cas d'apparition d'une **ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone de contrôle (C)** et d'une **ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone réactive (T)**. Ceci veut dire que l'échantillon d'urine est exempt de drogues.

La concentration de ces drogues spécifiques (ou de leurs dérivés) dans l'échantillon se situe en-dessous du seuil de détectabilité.


#### Résultat positif

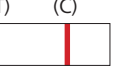

Le **résultat est positif** en cas d'apparition d'une **ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone de contrôle (C)** et d'**absence de ligne rouge dans la zone réactive (T)**.

La concentration de ces drogues spécifiques (ou de leurs dérivés) dans l'échantillon se situe au-delà du seuil de détectabilité. Il n'est pas possible d'en conclure le niveau de concentration ainsi que la gravité de la consommation correspondante.

#### Résultat non valide

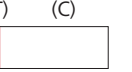

Le test n'a **pas été correctement réalisé** et est non valide en cas d'**absence de ligne de contrôle (C)** ou de **présence d'une seule ligne de test (T)**.

Vérifiez si vous avez précisément suivi tous les points du mode d'emploi. Réalisez un nouveau test avec un nouvel échantillon d'urine.

#### Indications et contraintes :

- Le multi-test rapide n'est pas un dispositif médical et ne peut donc pas être utilisé à des fins diagnostiques.
- Le test est positif si **aucune ligne** n'apparaît dans la zone de test (T).
- La prise délibérée d'adultérants peut nuire au test. En cas de soupçon sur la véracité des résultats, il est nécessaire de renouveler le test à l'aide d'un nouvel échantillon d'urine.
- L'auto-test ne peut pas différencier l'abus de drogues et la prise de médicaments similaires sur ordonnance médicale.
- Bien qu'une falsification du test ne puisse être envisagée en raison de la grande variété de substances, il n'est pas possible d'exclure la probabilité qu'une autre substance ou qu'une erreur technique ou inhérente à une procédure ait pu fausser le résultat du test.