

Technical Data Sheet

Eurodispenser® 1 plus



Descripción general del producto

Dispensador de metal resistente y autoclavable para la aplicación higiénica de productos de desinfección de manos, limpieza y cuidado de la piel.

Características

- Fácil intercambio de la válvula mediante la extracción desde el frente
- Dispensador de metal confiable y robusto
- Carcasa de versión metálica y válvula completamente autoclavable, carcasa de color a prueba de lavavajillas
- Instalación fácil incluso con espacio limitado
- Todas las botellas estándar insertables
- Intercambio de botellas simple y rápido
- Fácil manejo y limpieza
- Cantidad de dosificación ajustable a aprox. 0,75 a 1,5 ml por actuación
- Entrega incl. piezas de montaje, hoja de instrucciones y manual

Áreas

- Áreas funcionales
- Cerca de las puertas de las habitaciones de los pacientes
- En baños
- En las habitaciones de los médicos y en las estaciones de enfermería
- En camas, vendaje y carros redondos de sala
- En camas de pacientes
- En departamentos ambulatorios y ambulancias de transporte de pacientes
- En laboratorios
- En prácticas médicas
- En departamentos de servicios públicos
- En la cocina del hospital
- En áreas relevantes para la higiene en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria

Ventajas

- Todas las partes completamente autoclavables
- Fácil instalación incluso con espacio limitado
- Todas las botellas estándar insertables
- Cantidad de dosificación ajustable a aprox. 0,75 a 1,5 ml por actuación
- Entrega incl. piezas de montaje, hoja de instrucciones y manual




Eurodispenser® 1 plus

Material

- Cubierta de plata mate, aluminio anodizado; resistente a la corrosión y a prueba de golpes
- Panel, palanca de control y válvula de líquido de acero inoxidable V2A + Acero
- Panel posterior de PA (poliamida) y pantalla de salida hecho de plásticos POM (polioximetileno) con buena resistencia al alcohol y a la tensión
- Todos los materiales fueron probados para la conformidad alimentaria

Dosificación

El dispensador se ajusta a la dosis máxima cantidad de aprox. 1,5 ml por accionamiento. Si es necesario, la cantidad de dosificación se puede reducir gradualmente hasta aprox. 0,75 ml por accionamiento girando la pieza dosificadora.

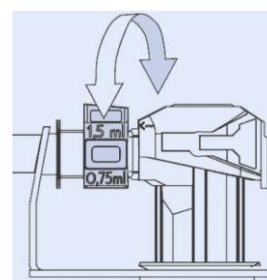

Datos técnicos

Dispensador brazo largo	350/500 ml	1 L
Profundidad incl. palanca de brazo largo	215 mm	225 mm
Altura	295 mm	340 mm
Ancho	82 mm	92 mm

Dispensador brazo corto	350/500 ml	1 L
Profundidad incl. palanca de brazo corto	160 mm	160 mm
Altura	315 mm	360 mm
Ancho	82 mm	90 mm

Preparación y montaje

Preparación del lugar de montaje

Al seleccionar la ubicación de montaje, lo siguiente los puntos deben ser considerados:

- Independientemente del tipo de dispensador, proporcione un espacio de aprox. 50 mm (necesario para desmontar el dispensador)
- Mantenga una distancia mínima entre el dispensador y la parte superior borde del lavabo o espacio de trabajo (sin problemas intercambio de botellas)
- La pared debe estar limpia, seca e incluso importa la capacidad de carga: además del peso de dispensador, válvula y botella de producto, la carga del brazo
- Se debe considerar el accionamiento de la palanca. Por lo tanto, utilice solo el material de montaje proporcionado para unir el Eurodispenser a la pared
- Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de gas u otros

Eurodispenser® 1 plus

Advertencia: el BODE Eurodispenser 1 plus no puede ser unido a la pared con Powerstrips. Para seguro montaje use el material de montaje provisto.

Para el montaje necesita una perforadora, una broca de 6 mm (el tipo depende del material de la pared) y un destornillador o un destornillador inalámbrico. Todos los demás materiales de montaje (pared anclajes, tornillos, cuñas) se incluyen en la entrega.

Marque los agujeros de perforación en la pared, realice la perforación y coloque la pared anclajes adentro. Saque el dispensador de la caja de cartón:

1. Presione la lengüeta de bloqueo y extraiga el soporte de pared alojamiento
2. Monte la placa posterior con anclajes de pared y tornillos en ubicación designada
3. Deslice el dispensador en la placa posterior (de arriba hacia abajo) hasta que la lengüeta de bloqueo se ajusta
4. Coloque la botella en el dispensador (de abajo hacia arriba)
5. Para la activación, presione la palanca del brazo varias veces, de modo que el tubo de inmersión absorbe el producto. Al hacerlo, mantenga tu mano debajo de la salida

Reprocesamiento

La limpieza y desinfección del cuerpo del dispensador y la válvula dosificadora deben realizarse cada vez que se cambia la botella.

Reprocesamiento manual del dispensador

- Saque la botella del dispensador
- Sacar la válvula dosificadora
- Empuje la tapa hacia arriba presionando la lengüeta de bloqueo
- Enjuague bien la cubierta con agua corriente caliente hasta que no los residuos del producto ya son visibles
- Limpiar la parte trasera, atornillar la parte del dispensador con agua humedecida tejido desechable
- Rocíe ambas partes del dispensador con un alcohol
- Desinfectante de superficie y límpielos con desechables
- Tejidos si es necesario; prestar atención al tiempo de aplicación
- Deslice en la cubierta
- Poner en una válvula dosificadora nueva o reprocesada por separado
- Enganche la botella nueva y bombee el producto

Reprocesamiento manual de la válvula

- En primer lugar, enjuague bien la válvula con agua caliente y limpiarlo de residuos del producto
- Enjuague bien la válvula con una superficie a base de alcohol desinfectante y dejarlo por 5 minutos
- Luego bombearlo seco
- Después de completar el secado, inserte la válvula nuevamente o guárdela área libre de polvo

Nota: no utilice productos abrasivos o limpiadores corrosivos.

Eurodispenser® 1 plus**Esterilización**

Para el uso rutinario y el cumplimiento de las normas de higiene, limpieza manual y desinfección del dispensador y válvula dosificadora suficiente. En áreas donde la higiene es particular importancia, un mayor estándar de higiene puede ser necesario. En este caso, todas las partes extraíbles del BODE Eurodispenser 1, puede esterilizarse en autoclave con vapor sobrecalentado (121 °C, 1 bar).

Presentación

Producto	Formato		Ref. HARTMANN
Eurodispenser 1 plus	1 L	Brazo largo	980479
Eurodispenser 1 plus	1 L	Brazo corto	981099
Eurodispenser 1 plus Rojo	1 L	Brazo largo	981252
Válvula recambio	1 L		980481

El dispensador se acondiciona en 10 unidades por caja de transporte. El transporte se debe realizar con cajas completas.