

MoliMed® for men activ




Spez.-Nr.: D 3.2423a

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2012-03-12

ÄNDERUNGSBLATT

Blatt / Ausgabe	ersetzt Ausgabe	Änderungsgrund
1-3 vom 2003-03-13	-----	Neues Technisches Datenblatt.
1-3 vom 2003-09-09	1-3 vom 2003-03-13	Aktualisierung der Daten
1-3 vom 2005-09-01	13 vom 2003-09-09	Aktualisierung der Daten / Relaunch 2005 (Umstellung auf weißes CF)
1-3 vom 2006-07-28	1-3 vom 2005-09-01	Verfallsdatum aufgenommen
1-3 vom 2006-07-28	1-3 vom 2006-07-28	Verfallsdatum gelöscht
1-3 vom 2012-03-12	1-3 vom 2006-07-28	Aktualisierung Produktgewicht

Abteilung	Datum	Unterschrift
Produktentwicklung SM-PDI	2012-03-12	

MoliMed® for men activ



Spez.-Nr.: D 3.2423a

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2012-03-12

1. Allgemeine Produktbeschreibung

Inkontinenz – Vorlage speziell für Männer entwickelt, mit Dry Plus Verteilerauflage und Ultra-Saugkern; Odour Neutraliser; vollflächige Vliesabdeckung; atmungsaktive Außenseite mit Textilcomfort; bietet bestmögliche Sicherheit durch höchste Saugkraft und Speicherleistung und schützt vor Rücknässungen; besonders bequem und diskret zu tragen, mit breitem Klebestreifen einfach in der Unterwäsche zu fixieren.

Produkteinstufung gemäß EG-Rahmenrichtlinie für unsterile Medizinprodukte der Klasse I.

2. Anwendung

Bei leichter Harninkontinenz für aktive männliche Patienten.

3. Aufmachung

MoliMed® for men activ

4. Produkteigenschaften


Material:	MoliMed® for men activ
- Wäscheschutz:	Vlies-Folien-Laminat, atmungsaktiv
- Saugkörper:	100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff, mit superabsorbierendem Polymer
- Verteilerauflage:	Curled Fiber, weiß
- Kleber:	Heißschmelzkleber
- Vlies:	Polypropylen - Vlies, hydrophil
- Abdeckung:	Silikonpapier

MoliMed® for men activ



Spez.-Nr.: D 3.2423a
 Abteilung: SM-PDI
 Datum: 2012-03-12

5. Produktskizze

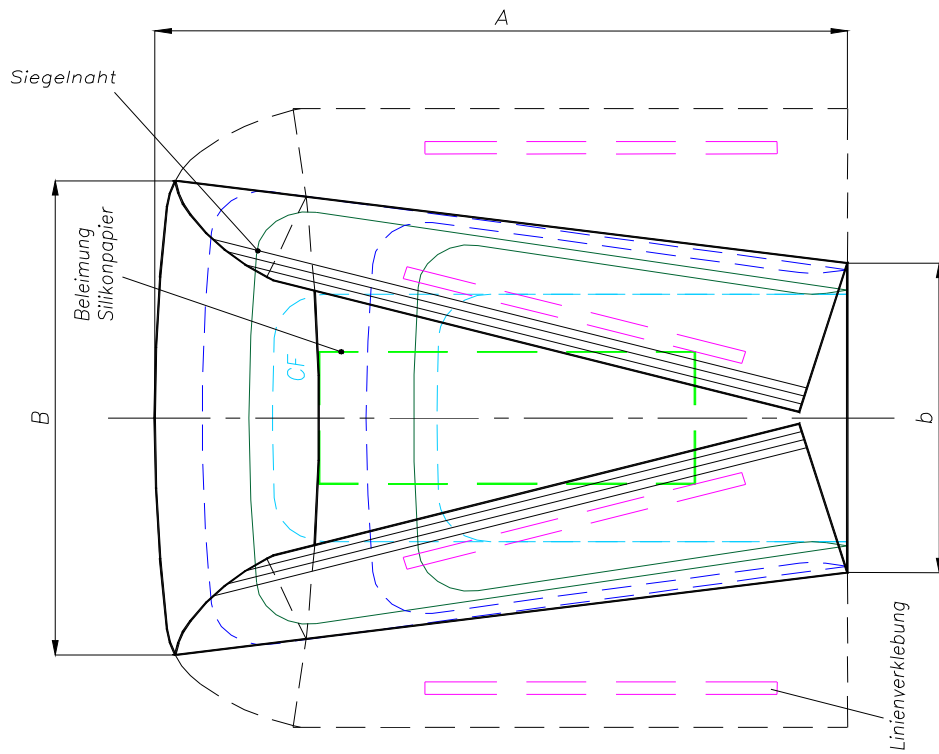

P32423-02

Abmessungen: [mm]		MoliMed® for men activ
Gesamtlänge:	A	147 ± 10
Gesamtbreite offene Seite:	B	115 ± 10
Gesamtbreite geschlossene Seite:	b	75 ± 10

MoliMed® for men activ



Spez.-Nr.: D 3.2423a

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2012-03-12

6. Produktanforderungen

Prüfmerkmale:		MoliMed® for men activ
Gesamtgewicht:	[g]	13,9 min. 9,9
Superabsorbent Polymer-Menge:	[g]	2,7 min. 2,1
Zellstoffgewicht:	[g]	6,6 min. 5,4
Zentrifugentest:	[g]	100 min. 40

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code:

z.B.:

2

Jahr

066

lfd. Tag


XXXXX

interner Schlüssel

8. Verpackung

MoliMed® for men activ in Polyethylen - Presspackbeutel verpackt; Transportkarton nach DIN, Verpackung auf Europalette.

12. März 2012

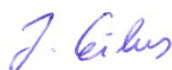

- Produktentwicklung SM-PDI-