

Moliform Premium Soft



Nº espec: D 3.2230a
Dpto.: SM-PDI
Fecha: 30.03.2011
Página: 1 de 4

Descripción general del producto

Moliform Premium Soft es un absorbente anatómico con capa superior Dry-Plus, capa de distribución de fluidos; núcleo ultra absorbente e indicador de humedad, absorbente extra-grande con una cobertura completa de tejido no tejido (non-woven) y barreras anti-fugas de excelente ajuste. Absorbente de forma anatómica, con ajustes elásticos en la entrepierna y confortable capa inferior textil.

El absorbente anatómico ofrece una protección óptima frente las pérdidas de orina gracias a su capacidad de absorción y retención de fluidos. Presenta barreras anti-fugas para una mayor seguridad y confianza.

Máxima retención de fluidos así como confort de uso. Las capacidades de absorción se presentan codificadas por color para una sencilla selección del producto. De fácil aplicación conjuntamente con mallas elásticas (MoliPants).

Moliform Premium Soft lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Moliform Premium Soft que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Moliform Premium Soft quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones e indicaciones

Adecuado para cualquier grado de incontinencia, tanto para pacientes encamados como activos / móviles. Seleccionado de acuerdo al nivel de incontinencia de cada usuario:

Presentación	Incontinencia	Absorción	Código color
Inicial	Leve	Día (600 - 900 ml)	Amarillo
Normal	Leve	Día (600 - 900 ml)	Amarillo
Plus	Moderada	Noche (900 - 1200 ml)	Verde
Extra	Severa	Super-noche (> 1200 ml)	Azul

Moliform Premium Soft



Nº espec: D 3.2230a
Dpto.: SM-PDI
Fecha: 30.03.2011
Página: 2 de 4

Sistema flexible para la incontinencia ya que se adapta a los requerimientos individuales del usuario.

Presentaciones

Referencia	Presentación	Absorción	Unidades / caja	Cupón precinto
168417	Moliform Premium Soft Inicial	Día	80 (20 x 4)	484162.6
168017	Moliform Premium Soft Normal	Día	80 (20 x 4)	470864.6
168217	Moliform Premium Soft Plus	Noche	80 (20 x 4)	470906.3
168317	Moliform Premium Soft Extra	Super-noche	80 (20 x 4)	471219.3

Características del producto

Composición

Protección frente líquidos: (capa inferior)	Capa inferior textil blanca (laminado de polipropileno y polietileno); impreso en color amarillo (presentaciones “normal” e “inicial”), verde (presentación “plus”) y azul (presentación “extra”)
Núcleo absorbente: (3 capas)	1ª capa: celulosa, fibra rizada 2ª capa: pulpa kraft ¹⁾ con polímero super-absorbente 3ª capa: 100% pulpa kraft ¹⁾ ¹⁾ blanqueado sin cloro
Non-woven:	Non-woven de polipropileno, hidrófilo, blanco
Barreras:	Non-woven de polipropileno, hidrófobo, blanco
Adhesivo:	Holmelt
Elásticos:	Elásticos en zona inguinal y barreras anti-fugas

Moliform Premium Soft



Nº espec: D 3.2230a

Dpto.: SM-PDI

Fecha: 30.03.2011

Página: 3 de 4

Características del producto

Propiedades específicas de producto

Características	Inicial	Normal	Plus	Extra
Peso total ¹⁾ [g]	51	60	64	92
Peso polímero super absorbente ¹⁾ [g]	5,5	6,6	11,4	9,8
Peso pulpa de celulosa ¹⁾ [g]	35,5	40,0	40,0	67,5
1 ^{er} tiempo de absorción ²⁾ [s] (máx.)	40	90	90	90
2 ^o tiempo de absorción ²⁾ [s] (máx.)	80	140	140	140
1 ^{er} retorno de la humedad ²⁾ [g] (máx.)	0,5	0,5	0,5	0,5
2 ^o retorno de la humedad ²⁾ [g] (máx.)	5,0	5,0	5,0	5,0


¹⁾ $\pm 10\%$ tolerancia (equivale a $\pm 3s$)

²⁾ con 50 ml de solución salina para la presentación Inicial; con 100 ml de solución salina para las presentaciones Normal / Plus / Extra

Látex: No contiene látex

Características del producto

Dimensiones de producto

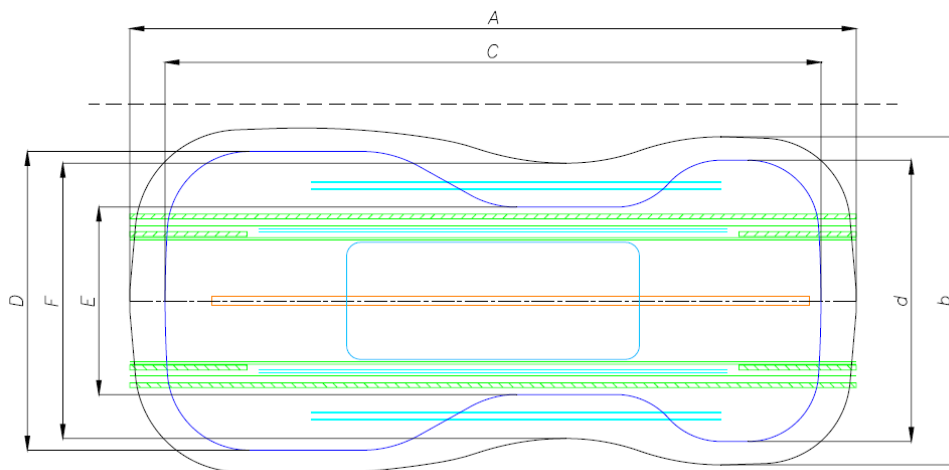

Moliform Premium Soft



Nº espec: D 3.2230a
Dpto.: SM-PDI
Fecha: 30.03.2011
Página: 4 de 4

Dimensiones [mm]	Inicial	Normal	Plus	Extra
Longitud total: A	525 ± 30	620 ± 30	620 ± 30	690 ± 30
Ancho total zona abdominal: b	260 ± 10	280 ± 10	280 ± 10	300 ± 10
Ancho total zona posterior: B	280 ± 10	295 ± 10	295 ± 10	310 ± 10
Ancho total zona inguinal: F	210 ± 10	235 ± 10	235 ± 10	245 ± 10
Longitud núcleo absorbente: C	474 ± 20	560 ± 20	560 ± 20	630 ± 20
Ancho núcleo absorbente: d (zona abdominal)	215 ± 10	240 ± 10	240 ± 10	250 ± 10
Ancho núcleo absorbente: D (zona posterior)	242 ± 20	255 ± 10	255 ± 10	260 ± 10
Anchuro núcleo absorbente: E (zona inguinal)	134 -4/+10	160 -4/+10	160 -4/+10	170 -4/+10

Etiquetado

Número de lote de 9 cifras (ejemplo):

LOT	0	162	XXXXX
	Año	Día de fabricación	Código de uso interno

Acondicionamiento

MoliForm Premium Soft se envasa en bolsas de polietileno (20 unidades) y en cajas de transporte (4 bolsas por caja) conforme a normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.