

Technical Data Sheet

MoliCare® Slip

MoliCare® Slip extra / verde
MoliCare® Slip extra plus / azul claro
MoliCare® Slip super / rosa



Descripción general del producto

MoliCare® Slip es un absorbente anatómico con elásticos con núcleo absorbente anatómico de tres capas, con capa distribuidora de líquidos, con barreras anti-fugas suaves y curvas, con ajustes elásticos en la entrepierna, con cobertura téxtil exterior azul, indicador de humedad, laterales transpirables en la zona de la cadera y cierres reposicionables tipo velcro.

Gracias a su núcleo absorbente especialmente diseñado, MoliCare® Slip ofrece máxima protección frente a las pérdidas de orina mediante su alta absorción y retención de líquidos. MoliCare® Slip ha sido testado dermatológicamente y consta de una alta retención; por ello, evita irritaciones en la piel y proporciona una alta confortabilidad de uso.

MoliCare® Slip lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está clasificado como producto sanitario clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para MoliCare® Slip que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de MoliCare® Slip quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

En caso de incontinencia urinaria moderada a severa e incontinencia fecal, así como para pacientes inquietos o altamente dependientes y pacientes móviles, proporcionado máxima seguridad.

Tamaños

	Talla S	Talla M	Talla L
MoliCare® Slip extra	•	•	•
MoliCare® Slip extra plus	•	•	•
MoliCare® Slip super		•	•

Technical Data Sheet


MoliCare® Slip

Características de producto

Partes	Materiales
Lámina trasera	Laminado azul de non-woven film; impreso en verde (extra), azul (extra plus) o rosa (super)
Núcleo absorbente	1ª Capa 100% de celulosa Kraft, blanqueada, libre de cloro elemental 2ª Capa de celulosa Kraft con polímero superabsorbente 3ª Capa de distribución de fibra rizada
Adhesivo	Hotmelt
Non-woven	Non-woven de polipropileno, hidrófilo, blanco
Barreras	Non-woven de polipropileno, hidrófobo, blanco
Laterales	Non-woven de polipropileno, hidrófobo, transpirable, blanco
Elásticos	Elásticos en la entrepierna y barreras fijas
Cierres	Cinta de non-woven reposicionable tipo velcro

Diseño del producto y dimensiones

MoliCare® Slip extra, extra plus y super

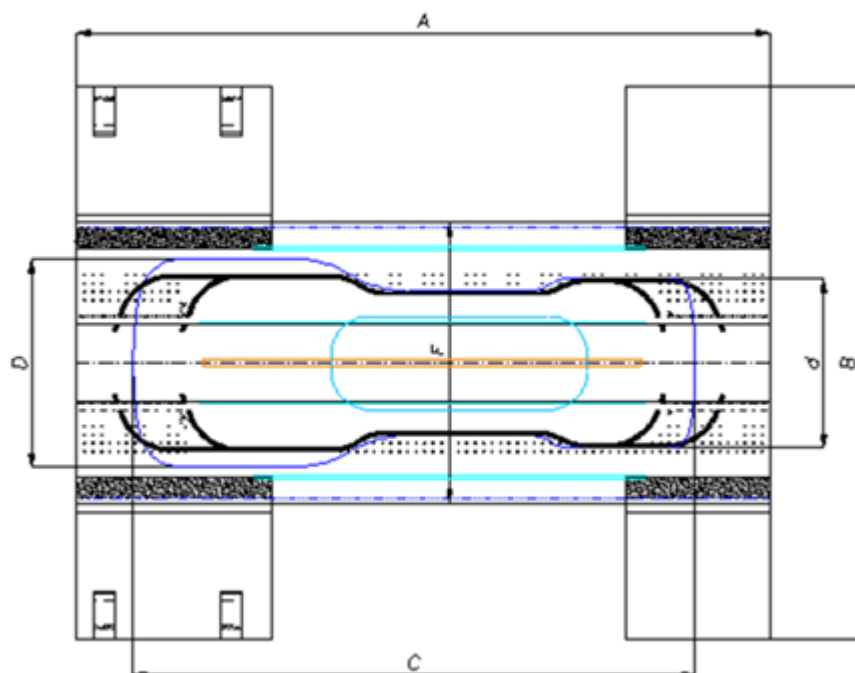

Technical Data Sheet

MoliCare® Slip

Dimensiones [mm]		Talla S	Talla M	Talla L
Longitud total:	A	700 ± 20	815 ± 20	980 ± 20
Ancho total (zona abdominal):	B	490 -20/+40	650 -20/+40	780 -20/+40
Ancho total (zona inguinal):	F	240 ± 10	320 ± 10	320 ± 10
Longitud del núcleo absorbente:	C	540 ± 30	660 ± 30	780 ± 40
Ancho del núcleo absorbente (zona abdominal):	d	190 ± 10	200 ± 10	200 ± 10
Ancho del núcleo absorbente (zona cinta):	D	190 ± 10	245 ± 10	270 ± 10

Talla	Talla S	Talla M	Talla L
Apropiado para tamaño de cintura [cm]	60 - 90	90 - 120	120 – 150

Propiedades específicas de producto

MoliCare® Slip extra

		Talla S	Talla M	Talla L
Peso total*:	[g]	60	83	104

MoliCare® Slip extra plus

		Talla S	Talla M	Talla L
Peso total*:	[g]	65	89	109

MoliCare® Slip super

		Talla M	Talla L
Peso total*:	[g]	89	106

* tolerancia de ± 10 (equivalente a ± 3 s)

Látex: no contiene látex.

Technical Data Sheet

MoliCare® Slip

Presentaciones

Producto	Unidades /presentación	Talla	Ref. HARTMANN
MoliCare® Slip extra	30	Talla S	165131
	30	Talla M	165132
	30	Talla L	165133
MoliCare® Slip extra plus	30	Talla S	165231
	30	Talla M	165232
	30	Talla L	165233
MoliCare® Slip super	30	Talla M	165332
	30	Talla L	165333

Etiquetado

Número de lote de 9 dígitos con la fecha de producción delante:
ej.:

Fecha de producción				LOTE - Código				
Día	Hora	Minuto		Año 201X / 202X	Código interno	Código interno	Código interno	Cumulated check sum
***	**	**	LOTE	X	XXX	XX	XX	X

Acondicionamiento

MoliCare® Slip se presenta en 3 bolsas de polietileno en cajas de transporte según normas DIN, selladas con cinta adhesiva y paletizadas en Europallets.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.